

Guía de Operación de Arco en C Philips

Este video instructivo muestra la operación de un sistema de arco en C de Philips en un entorno quirúrgico. Se detallan los movimientos mecánicos del brazo, la colocación de cubiertas estériles de protección y el posicionamiento del equipo respecto a la mesa de operaciones durante un procedimiento clínico real.

VIDEO	Capacitacion_arco_en_C
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	04:19 (mm:ss)
PASOS	12
SECCIONES	6

Índice

Ajuste de Movimientos Mecánicos

1. Identificar movimiento de rotación horizontal	00:02 · pág. 3
2. Bloquear o liberar movimiento horizontal	00:24 · pág. 3
3. Ajustar ángulo de inclinación lateral	00:42 · pág. 4
4. Ejecutar movimiento de rotación orbital	00:55 · pág. 4

Seguridad y Radioprotección

5. Preparar equipamiento de radioprotección	01:23 · pág. 5
---	----------------

Posicionamiento del Paciente

6. Operar control remoto de camilla	01:39 · pág. 5
---	----------------

Preparación Estéril

7. Colocar cubierta estéril protectora	01:57 · pág. 6
--	----------------

Posicionamiento del Paciente

8. Alinear arco en C con camilla	02:10 · pág. 6
--	----------------

Adquisición de Imagen

9. Verificar parámetros en pantalla consola	02:31 · pág. 7
---	----------------

Posicionamiento del Paciente

10. Definir trayectoria de aproximación	02:41 · pág. 7
---	----------------

Adquisición de Imagen

11. Monitorear adquisición en tiempo real	03:08 · pág. 8
---	----------------

Apagado y Desconexión

12. Desconectar cables tras finalizar procedimiento	04:02 · pág. 8
---	----------------



PASO 1 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:02

Identificar movimiento de rotación horizontal

El instructor demuestra el movimiento de rotación horizontal del brazo en C sobre su propio eje, liberando los frenos manuales correspondientes.



PASO 2 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:24

Bloquear o liberar movimiento horizontal

Se señala la manilla de bloqueo del brazo para detener o liberar el movimiento de rotación horizontal del arco en C de forma segura.



PASO 3 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:42

Ajustar ángulo de inclinación lateral

Se demuestra la liberación de los seguros mecánicos, identificando los iconos de candado abierto y cerrado grabados en la pieza, para permitir la inclinación angular del arco en C.



PASO 4 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:55

Ejecutar movimiento de rotación orbital


El operador realiza el deslizamiento orbital del brazo en C para ajustar el plano de proyección radiográfica sobre el paciente.



PASO 5 · SEGURIDAD Y RADIOPROTECCIÓN · 01:23

Preparar equipamiento de radioprotección


El personal se dirige a buscar los delantales plomados antes de iniciar la emisión de radiación en el pabellón.

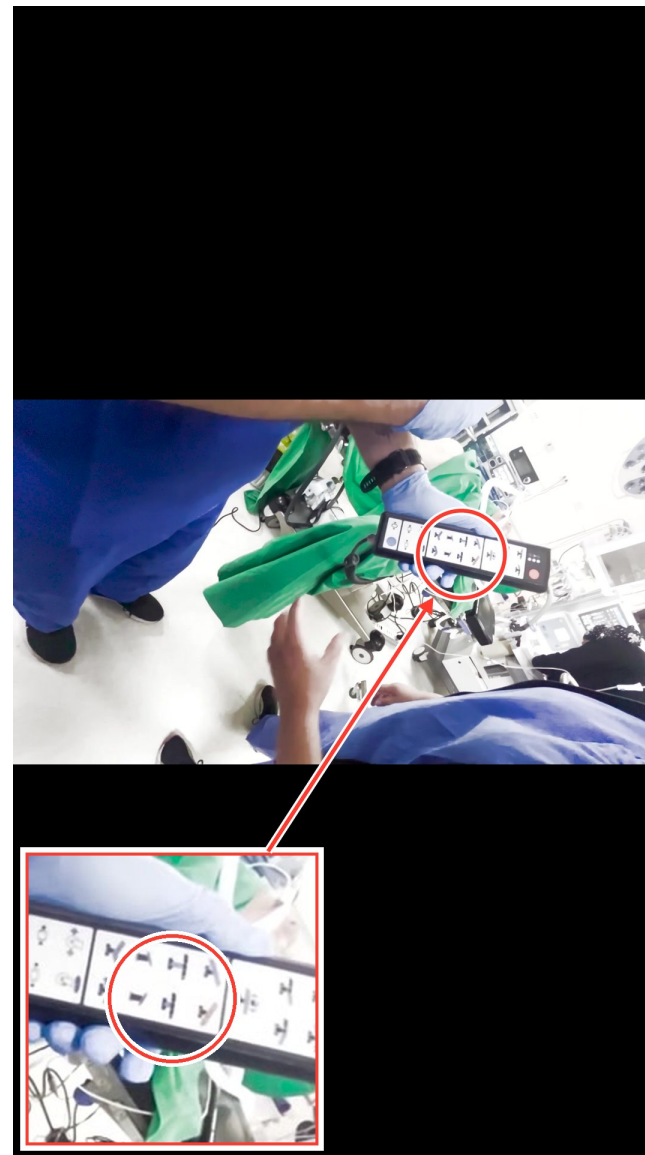

PASO 6 · POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE · 01:39

Operar control remoto de camilla

Se utiliza el mando de la camilla quirúrgica que contiene iconos con diferentes planos y posiciones para acomodar al paciente antes del examen.

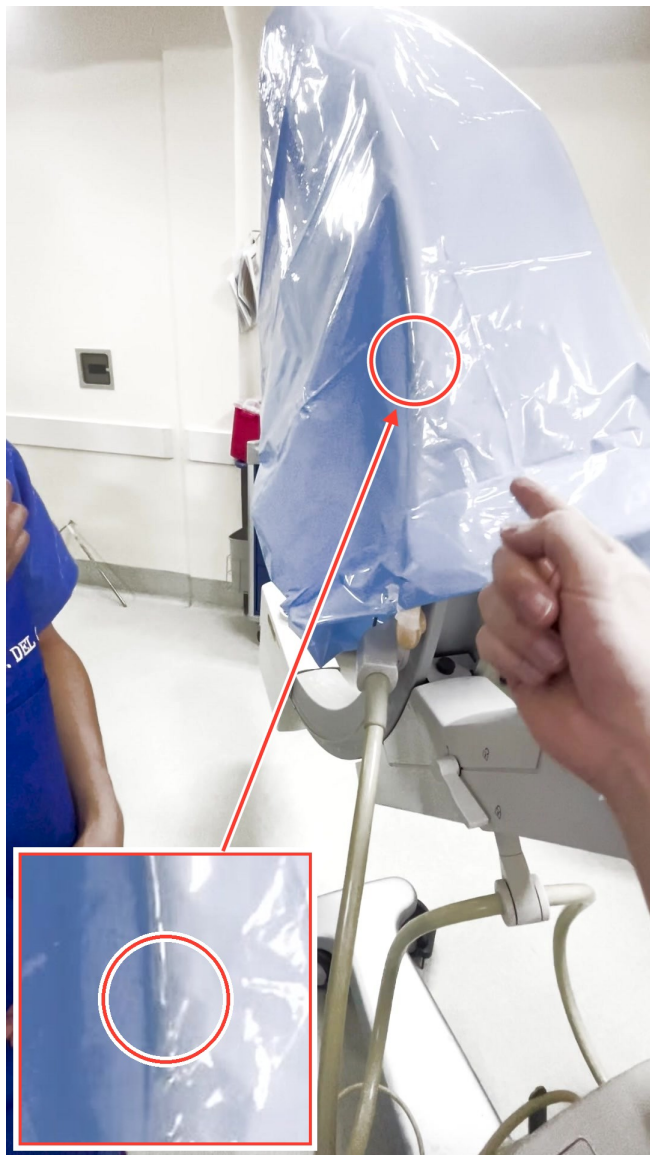

PASO 7 · PREPARACIÓN ESTÉRIL · 01:57

Colocar cubierta estéril protectora


Se muestra la funda plástica estéril colocada sobre el receptor de imagen para proteger el campo operatorio y evitar la contaminación.



PASO 8 · POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE · 02:10

Alinear arco en C con camilla


Se realiza el acercamiento físico del equipo para introducir el detector y el tubo de rayos X bajo y sobre la camilla respectivamente, sosteniendo la empuñadura del arco.

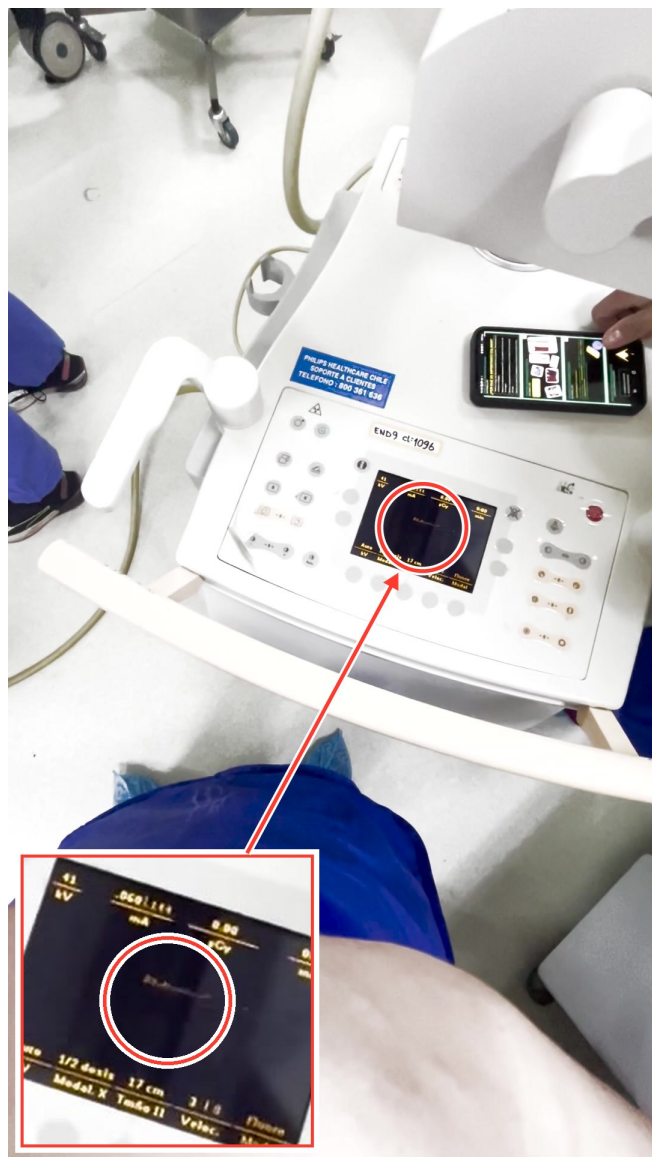

PASO 9 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 02:31

Verificar parámetros en pantalla consola

Se muestran los parámetros de adquisición en la consola de control, donde se lee 'END9 cl:1096' junto a los valores de exposición activos en el panel.

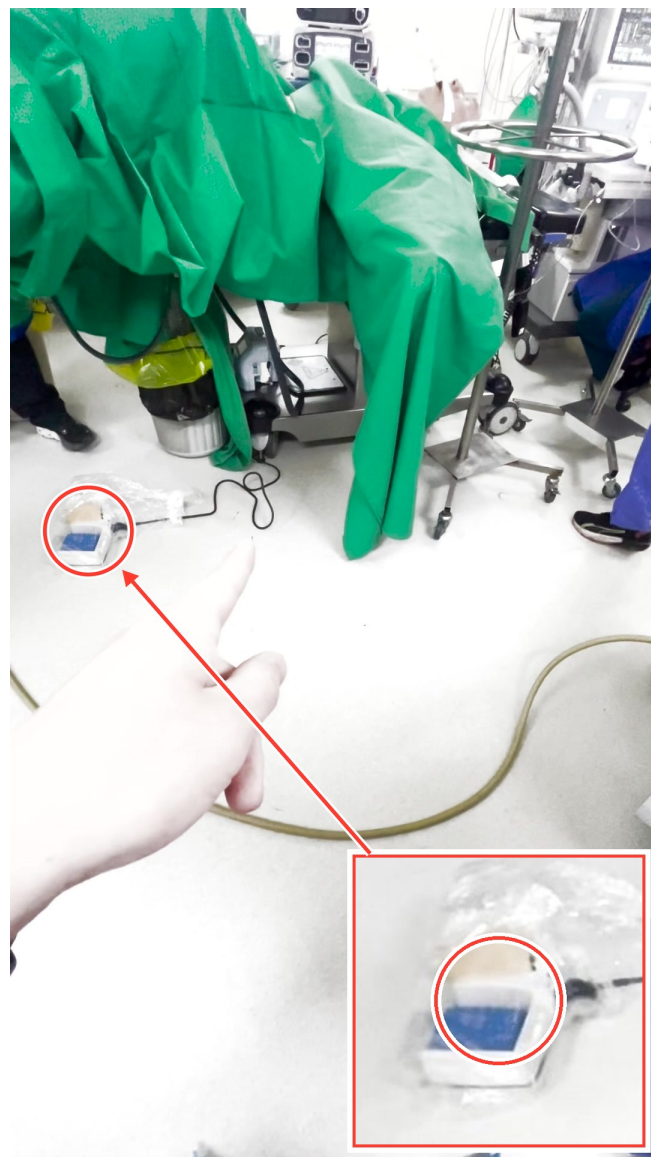

PASO 10 · POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE · 02:41

Definir trayectoria de aproximación

Se planifica y verifica la entrada del arco en C hacia el paciente, señalando el pedal de disparo en el suelo para evitar obstáculos con los cables.



PASO 11 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 03:08

Monitorear adquisición en tiempo real

Durante la inserción del catéter, los cirujanos controlan visualmente la posición a través del monitor del sistema de fluoroscopia.



PASO 12 · APAGADO Y DESCONEXIÓN · 04:02

Desconectar cables tras finalizar procedimiento

Se retiran las conexiones eléctricas y de datos en la pared una vez finalizado el examen para proceder al guardado del equipo.

Transcripción del audio

00:01 El movimiento... como que... horizontal... o sea, ese es como el movimiento...

00:10 Ah, ya, una rotación en torno a este eje.

00:12 ...horizontal, pero sin... como un movimiento completo del tubo. Sí. Sin... o sea, sin mover... pero, como movimiento completo del arco en C, sí.

00:23 Y ese lo bloqueas con esto.

00:26 Sí. Claro.

00:31 ¿Y el otro? Ah, bueno.

00:35 Claro. Súper.

00:40 Pero acá, generalmente, no tenemos ángulo. Podríamos darle un poco de ángulo... eh... acá.

00:50 Súper. Perdón, era el otro.

01:01 Si es que no pudiéramos ver una... como... si no pudiéramos ver detalladamente la bifurcación renal, tal vez podríamos un poquito angular.

01:09 Pero, generalmente, el... la cavidad abdominal, por lo menos en este caso... la zona renal, cara renal, no... no lo vamos a necesitar tanto. No.

01:20 Y, así, los delantales plomados, ahora que está todo listo.

01:25 Están acá.

01:28 Aquí se ponen... lo que hay de insumo para ahí.

01:38 Si es que... si es que se empuja el arco, la otra cámara.

01:43 Entonces, se desplaza... se desplaza así. Se aprieta y se desplaza a la vez. Súper.

01:47 ¿Se aprieta de allá? Ya. Se desplaza de allá porque... las de... las de otras son automáticas. Sí, son automáticas.

01:54 Entonces, la fonoaudióloga le puso esto para proteger y está estéril. Y tú le pusiste acá este papelito para que no se sobe... para que no se... No.

02:09 ¿Y, Pancho, y este doblez lo hace adrede de algo?

02:14 ¿Mmm? ¿Cómo? ¿Cuál?

02:17 Ese doblez que le hace acá... ese es un doblez. ¿Mmm? ¿Sí? ¿Es por algo o es... lo hizo...?

02:22 No, no, no, para acomodarlo más. Ah, listo. No, para que pueda caber en el espacio de allá. Ya, súper.

02:28 Están explicando que hay que entrar por acá como para que tengan habilitado el espacio, sí. Ah, ya.

02:35 O sea...

02:39 Acá, sí. Se va a entrar por acá, con el... con esto. Se va a entrar directo así o... No.

03:07 ¿Esa cámara está en la punta de ese catéter?

03:10 Sí. Ah, ya.

03:31 Entonces, la de abajo...

03:57 Listo. ¿Y la otra está acá nomás? Sí.

04:02 ¿La de abajo está aquí? Sí, la desconecto.