

Operación de Tomógrafo Computado Canon Aquilion

Este video instructivo muestra la configuración de protocolos y la adquisición de imágenes médicas en un tomógrafo computado Canon Aquilion, abarcando desde la adquisición del escanograma hasta la visualización en tiempo real y la secuencia de contrastes.

VIDEO	TC_13_Adquisicion_trifasico_contraste_quick_exam_escanograma
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	07:18 (mm:ss)
PASOS	16
SECCIONES	4

Índice

Adquisición del escanograma

1. Iniciar posicionamiento de camilla	00:02 · pág. 3
2. Verificar preparacion del escaneo	00:25 · pág. 4
3. Omitir el resto del escanograma	00:33 · pág. 5

Planificación del estudio

4. Ajustar campo de vision global	01:08 · pág. 6
5. Definir rango individual por fase	01:29 · pág. 7
6. Verificar parametros de reconstruccion	01:54 · pág. 8
7. Configurar D-FOV en Scan Details	02:32 · pág. 9
8. Ajustar reconstrucciones en Multi View	02:40 · pág. 10
9. Confirmar planificacion de la fase	03:03 · pág. 11

Adquisición de imagen

10. Advertencia de limite de rango	03:19 · pág. 12
--	-----------------

Planificación del estudio


11. Reducir rango de escaneo	03:40 · pág. 13
------------------------------------	-----------------

Adquisición de imagen

12. Adquirir primera fase sin contraste	04:02 · pág. 14
13. Sincronizar escaneo e inyectora de contraste	04:26 · pág. 15
14. Monitorear tiempo en el gantry	04:35 · pág. 16

Finalización y nuevos estudios

15. Finalizar examen actual	05:49 · pág. 17
16. Reutilice el escanograma para otro estudio	06:04 · pág. 18

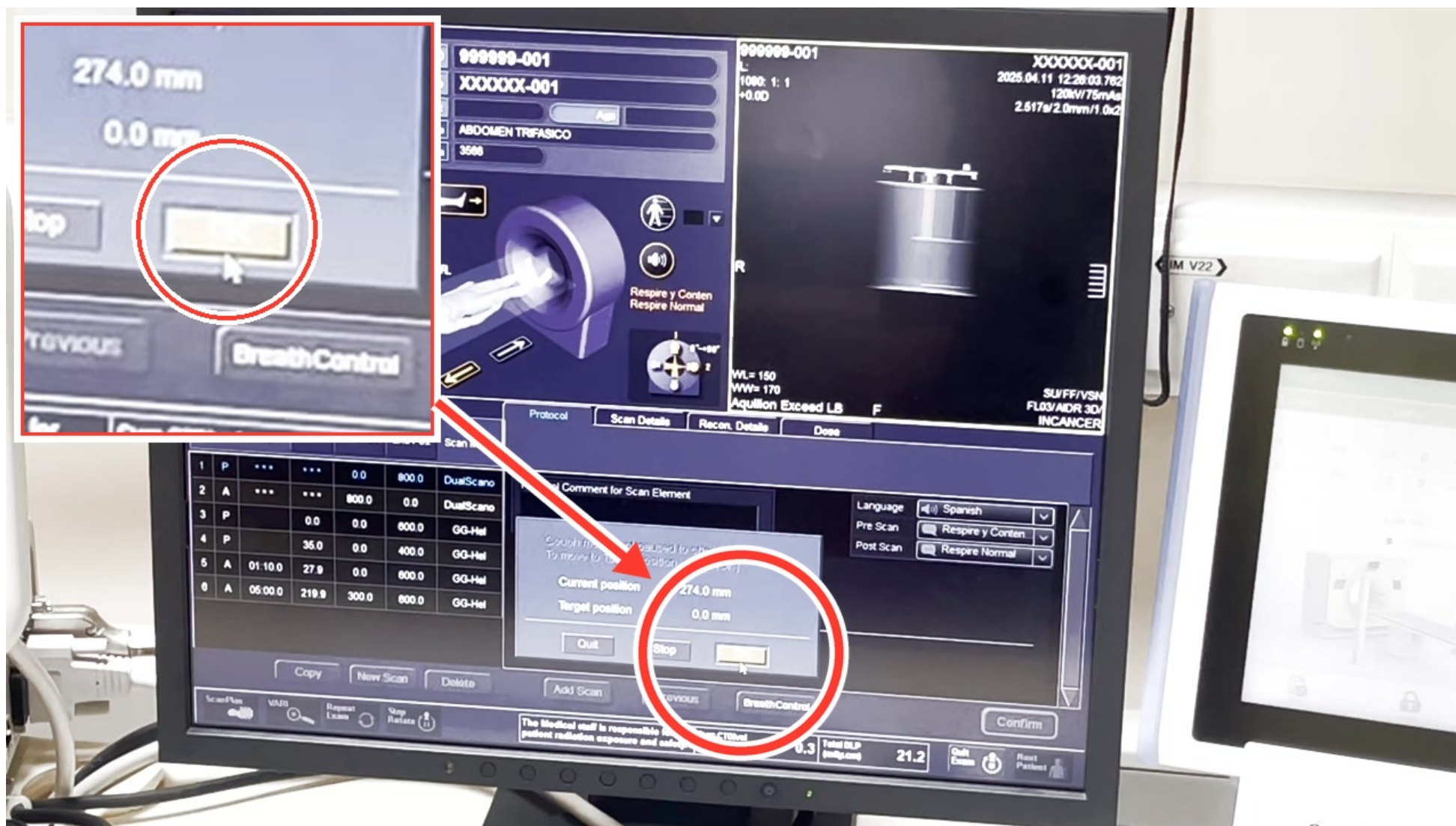

PASO 1 · ADQUISICIÓN DEL ESCANOGRAMA · 00:02

Iniciar posicionamiento de camilla


El operador confirma el inicio del movimiento de la camilla a la posición de inicio a 274.0 mm, haciendo clic sobre el botón de inicio (flecha hacia adelante parpadeante) en la ventana flotante.



PASO 2 · ADQUISICIÓN DEL ESCANOGRAMA · 00:25

Verificar preparacion del escaneo

Una vez que la luz del boton de escaneo se queda fija en la consola, se presiona para iniciar la radiacion. En la pantalla se observa que la ventana de advertencia de posicionamiento se ha cerrado.

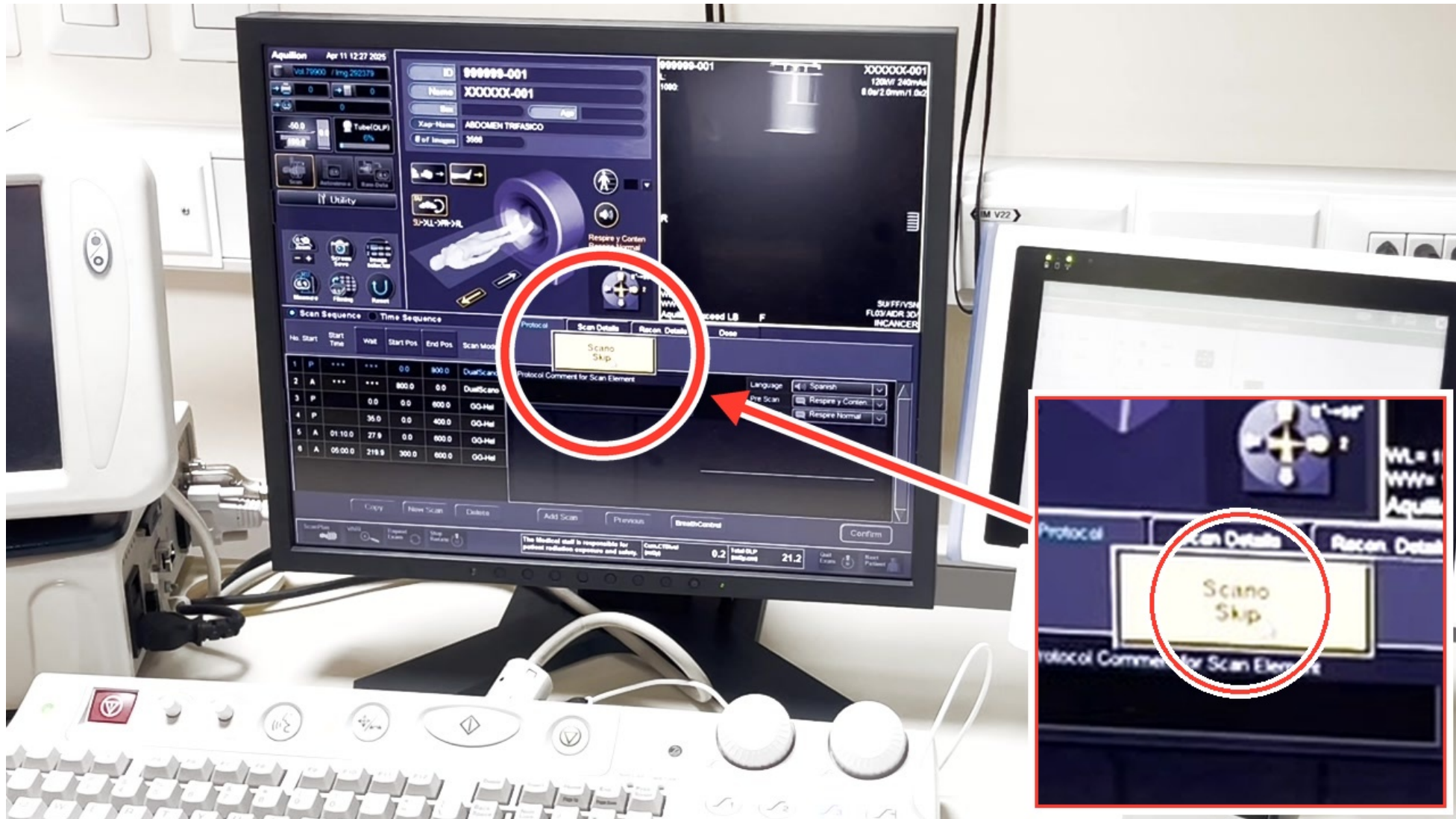

PASO 3 · ADQUISICIÓN DEL ESCANOGRAMA · 00:33

Omitir el resto del escanograma

Se selecciona 'Scano Skip' en pantalla cuando el area de interes ya ha sido escaneada y el tubo se encuentra en el aire.



PASO 4 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 01:08

Ajustar campo de vision global

Se seleccionan todas las cajas de escaneo de forma simultanea en el menu 'Change Scans' marcando 'All' para aplicar un mismo FOV uniforme.



PASO 5 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 01:29

Definir rango individual por fase


Se selecciona 'Individual' en el menu 'Change Scans' para ajustar de manera independiente el rango de escaneo arrastrando los marcadores en el escanograma.



PASO 6 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 01:54

Verificar parametros de reconstruccion


Se accede a la pestaña de detalles de reconstruccion 'Recon Details' para verificar el grosor de corte, intervalo y areas que se van a reconstruir.

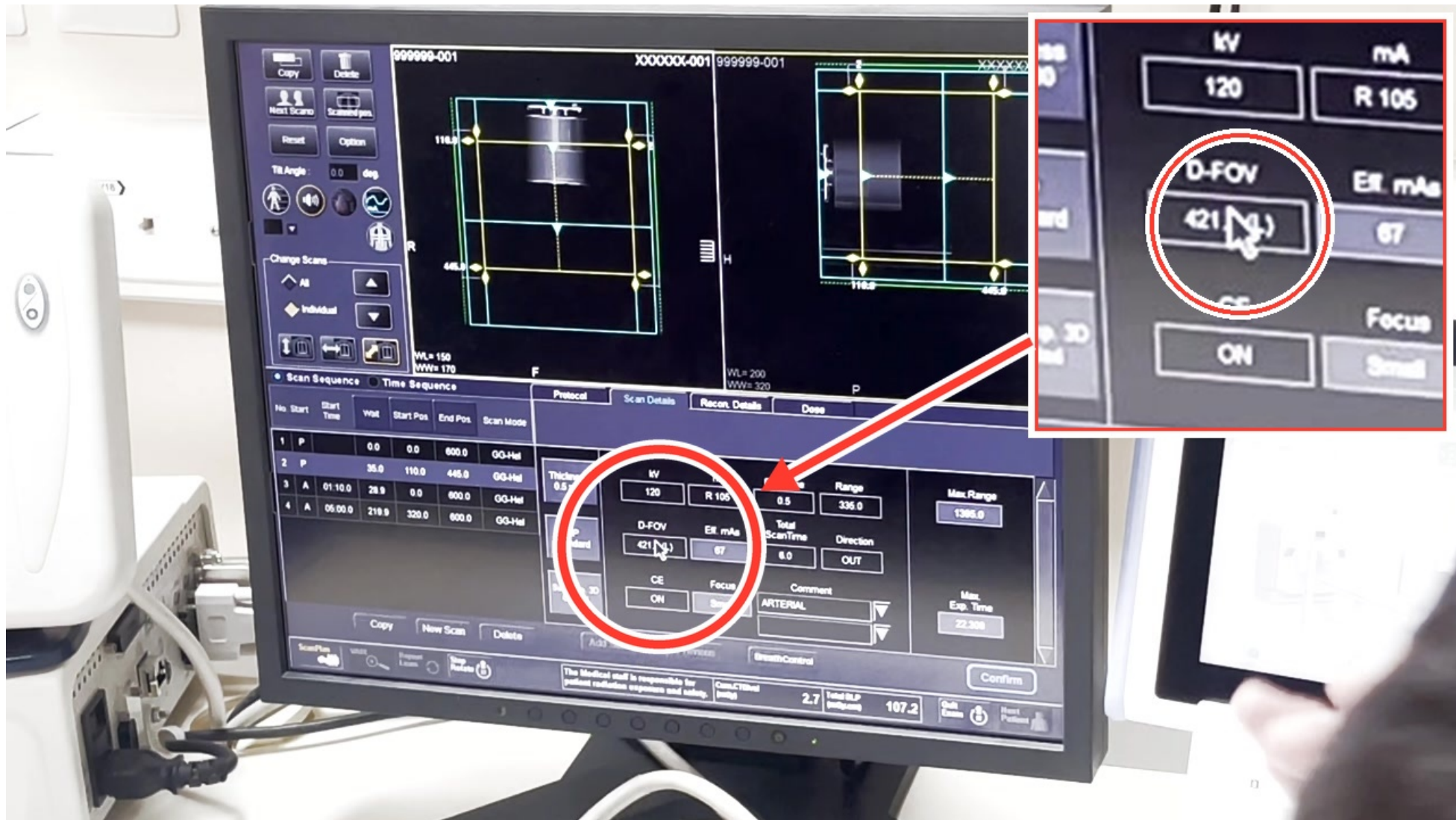

PASO 7 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 02:32

Configurar D-FOV en Scan Details

Se hace clic sobre el campo 'D-FOV' en la pestaña 'Scan Details' para ajustar el diametro del campo de vision, el cual muestra un valor de 421.1 (L).

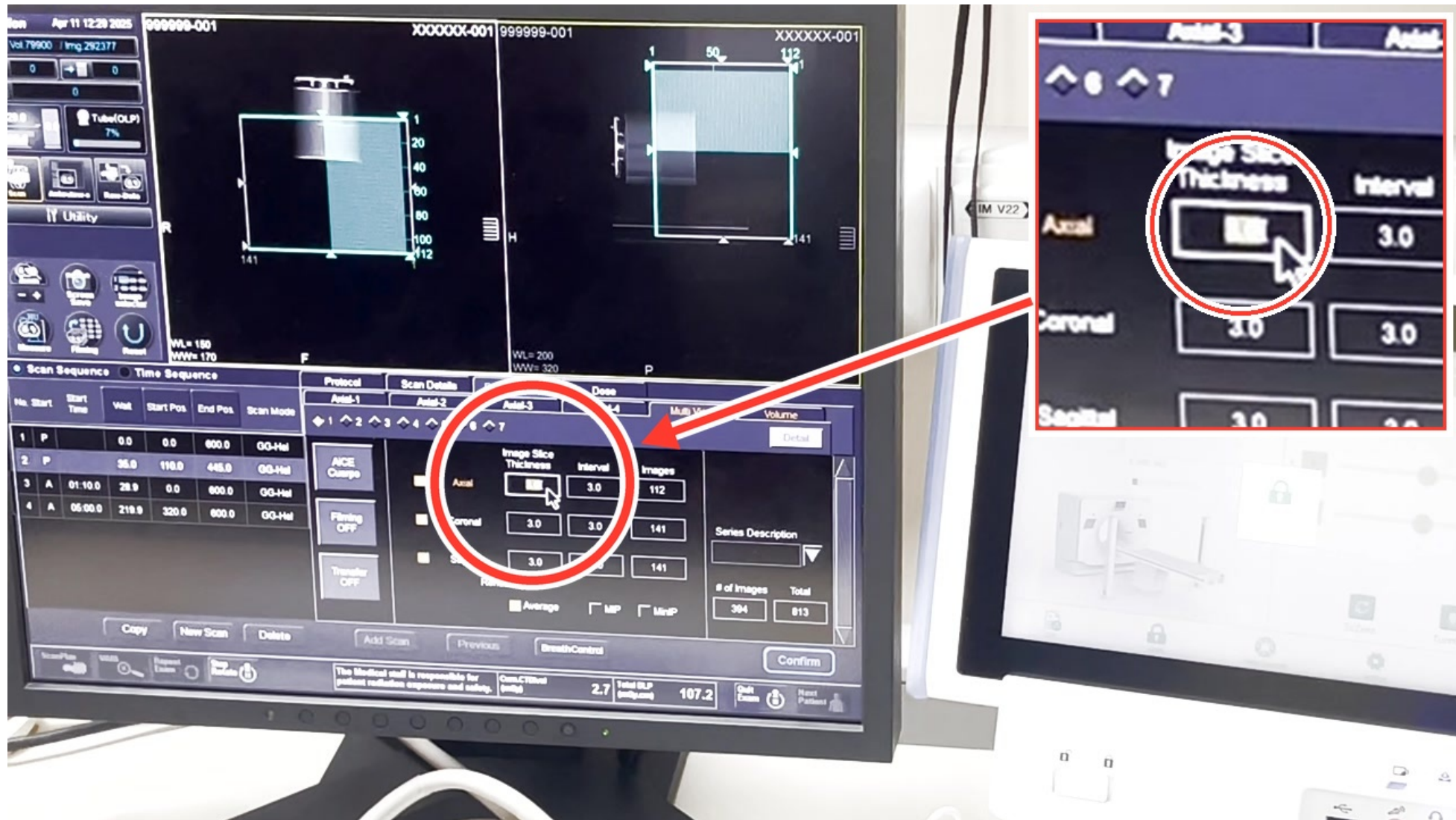

PASO 8 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 02:40

Ajustar reconstrucciones en Multi View


Se accede a la pestaña 'Multi View' para configurar de manera específica el grosor y el intervalo de las reconstrucciones axiales, coroneles o sagitales.



PASO 9 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 03:03

Confirmar planificación de la fase

Se presiona el botón 'Confirm' ubicado en la esquina inferior derecha para validar y fijar la configuración de la fase de estudio planificada.

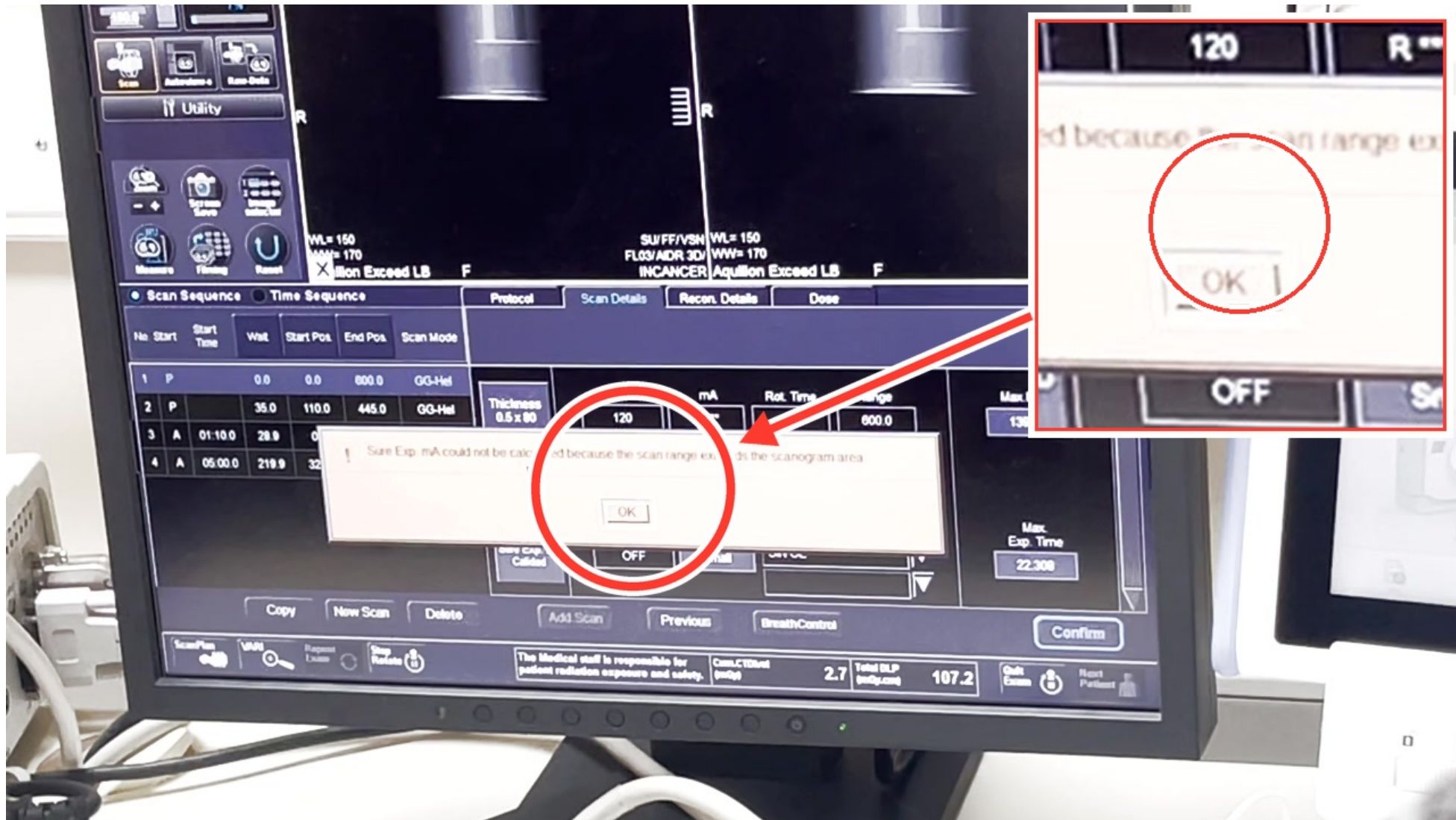

PASO 10 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 03:19

Advertencia de limite de rango

Aparece la advertencia 'Sure Exp. mA could not be calculated because the scan range exceeds the scanogram area', indicando que el rango de escaneo planificado supera los limites del escanograma.



PASO 11 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 03:40

Reducir rango de escaneo

Se regresa a la pantalla de planificación para reajustar y acortar los límites de las cajas amarillas de escaneo sobre el escanograma de referencia.



PASO 12 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 04:02

Adquirir primera fase sin contraste

Se realiza el escaneo de la primera fase sin medio de contraste ('SIN CE') y se verifica que las imágenes se reconstruyen en tiempo real en la pantalla superior.



PASO 13 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 04:26

Sincronizar escaneo e inyectora de contraste

Se inicia simultáneamente la adquisición de la fase arterial y la inyección del medio de contraste presionando ambos botones a la vez.



PASO 14 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 04:35

Monitorear tiempo en el gantry


Se puede visualizar el temporizador de cuenta regresiva directamente en la pantalla integrada del gantry del tomógrafo Canon.



PASO 15 · FINALIZACIÓN Y NUEVOS ESTUDIOS · 05:49

Finalizar examen actual

Se hace clic sobre el boton 'Quit Exam' en la parte inferior de la pantalla para concluir definitivamente el protocolo del paciente.

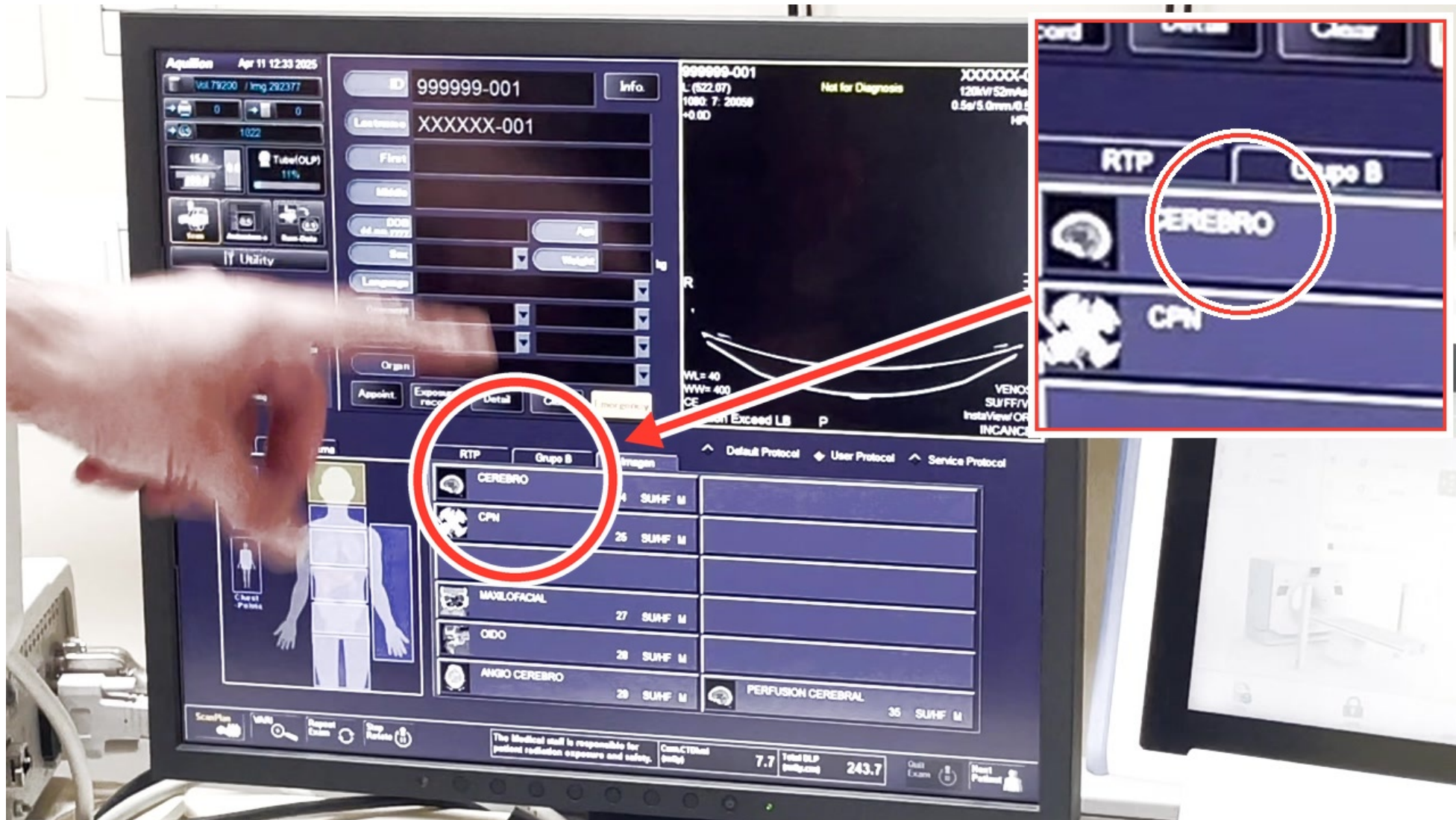

PASO 16 · FINALIZACIÓN Y NUEVOS ESTUDIOS · 06:04

Reutilice el escanograma para otro estudio

Es posible reutilizar el escanograma para planificar estudios adicionales sin volver a escanear. En la pantalla se muestran los protocolos disponibles bajo el grupo RTP, como CEREBRO, CPN, MAXILOFACIAL u OIDO.

Transcripción del audio

- 00:01 Me pide permiso para ir a la posición de inicio y vamos nuevamente con el escanograma.
- 00:23 Parpadea, va a tomar el pulso, fijo, comienza la radiación.
- 00:31 Ya no giro más, sigo en el aire, scan complete.
- 00:35 Se detiene la camilla, el tubo cambia de de ángulo y desde aquí se devuelve ahora para la otra proyección. Entonces así tengo el el doble escanograma.
- 00:54 Al principio aparecen todas las cajas juntas seleccionadas. ¿Cuál es la idea?
- 00:59 Voy a usar la lupa con el del medio a la derecha.
- 01:04 Con el del medio, el rotary presionado, hago un panel. Es que yo pueda seleccionar todas para que así le dé el mismo FOV a todas las cajas. ¿De acuerdo? Y ahí están todos seleccionados.
- 01:15 Entonces ahora yo voy una por una pero definiendo inicio y término.
- 01:21 ¿Cómo por ejemplo cambio el FOV? Con este. O me pongo, bueno ya está listo pero, por ejemplo, el inicio y término pongo la manito en el rombo y al hacer clic toma el rombo y ahí lo puedo mover.
- 01:31 Entonces ya, digamos el el sin contraste es todo. El arterial, no sé, ese ese es más abajo. El venoso va a ser todo. Y el tardío, ahí, el tardío como le habíamos puesto las coordenadas, aparece más abajo porque tiene que ver con con este elemento.
- 01:50 ¿Okay? De acá también puedo ir a la Recon. Están en naranja. Fíjense. De amarillo, que es lo que voy a adquirir, pasa a naranja que es lo que va a reconstruir.
- 02:00 Entonces, yo quiero reconstruir el cuerpo y, por ejemplo, le pedí de hueso. Y bueno, el hueso lo quiero más chico. Aquí ustedes pueden definir para que solo reconstruya eso. Por ejemplo, fuera el pulmón. Fuera el pulmón, ah bueno, el pulmón está acá, entonces ahí y dejo solo el pulmón, por ejemplo.
- 02:15 Y ahora vuelvo al del cuerpo. No, el cuerpo lo quiero completo. Entonces, ustedes ya pueden ir definiendo esto.
- 02:20 Y para dejar el FOV pico, por ejemplo, el cerebro que nosotros lo usamos siempre en 210...
- 02:26 Ah, este. Aquí donde aquí tú ya le puedes poner, por ejemplo, 210 y ya va a estar fijo. Entonces, el otro es simplemente inicio y término, nomás.
- 02:35 Entonces, yo voy recorriendo, y aquí tengo los multi-view, ¿cierto?
- 02:41 Entonces, eso viene el axial, ahí me muestra cómo va a ser el axial. El coronal...
- 02:47 Y me saca el coronal que está muy largo, entonces, lo voy a ajustar.
- 02:51 Y aquí ustedes lo dejan listo. Es por eso les quería mostrar acá. Y lo mismo para el sagital.
- 03:00 Y bueno, si ya está todo definido, confirmo.
- 03:07 Ah, lo que pasa es que está muy abajo.
- 03:10 Me pide permiso para ir a la posición de inicio.
- 03:16 Ya. Dice que el modulador no puede asegurarme que se cumpla lo requerido porque hay partes que lo tiré donde no tengo doble escanograma.
- 03:24 Okay.
- 03:29 Ah, ya, es muy largo ese. Bueno.
- 03:33 Voy al scan plan nuevamente, lo voy a achicar porque está...
- 03:49 Entonces, el sin contraste.
- 03:55 Fijo y va.
- 04:02 Y la imagen es en tiempo real.
- 04:06 Esta imagen ya se puede visualizar inmediatamente.
- 04:10 Y esta es la que se guarda acá como instaview.
- 04:16 Ahora viene el arterial. Entonces, está parpadeando, fijo.
- 04:24 Programamos la inyectora, los dos al mismo tiempo. Y ahí va el tiempo.
- 04:32 Y si se fijan en el equipo, miren, dice el tiempo también en la pantalla. Ah, sí, ahí.
- 04:38 Ahí, entonces si está el tecnólogo adentro viendo la vía, puede revisar, allá me queda la típica de ella, capaz.
- 04:51 O le hace la seña, ahí puede mirar tranquilamente.
- 04:55 De hecho el tecnólogo en Curicó me dio risa porque también tienen cámara, miró el tiempo, hizo como que se estaba tomando un café.
- 05:01 Y después salió.
- 05:07 Y ahora lo que le falta para lanzar el venoso a los 70 segundos.

- 05:43 Y esto es todo. Sí. Ya.
- 05:45 Entonces ahora, no necesito... bueno, quit exam.
- 05:50 Aquí puedo hacer un nuevo examen si quiero al paciente, si le falta un cerebro, etcétera, lo que necesite, si no...
- 05:56 Y ahí ocupo el mismo topograma.
- 05:59 Sí, sí van a ser varios, la idea es que el primero lo haga más largo para, le pongo quit exam y puedo usar para el mismo paciente el mismo topograma. Sí, por ejemplo, elijo cerebro, me va a aparecer el mismo scan que ya tenía.
- 06:12 Entonces si van a, si sale, ah bueno, les pide que el... ya, era supino la cabeza, ya no me acuerdo, pero ahí pueden mirar que para asegurarse la posición.
- 06:22 Y la va a tomar desde el escanograma.
- 06:26 Ah, lo había sacado.
- 06:38 Sí, la idea es que ustedes pueden hacer un escanograma largo.
- 06:43 Entonces le hacen el cerebro, después se van a... ¿podemos entrar a buscar adentro?
- 06:46 Sí, sí, sí.
- 06:47 Sí, eso se puede hacer, por ejemplo, lo dejamos para trauma, se toma uno solo y de ahí hacen el cerebro, le sacan la, la columna.
- 06:57 Por eso mi duda era, ya está, ya hice por ejemplo el topograma, hice la primera parte y quiero agregar más partes. Y ahí tengo que poner quit exam.
- 07:04 Quit exam y luego tú seleccionas y haces clic en el otro protocolo y se carga. Sí.
- 07:10 Podemos hacer otra prueba con un angio.