

Operación del arco en C

El video explica los movimientos y bloqueos del brazo de un arco en C de fluoroscopia. Se detalla cómo manipular el brazo para realizar ajustes de posición durante el procedimiento.

VIDEO	IMG_4976
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	01:20 (mm:ss)
PASOS	3
SECCIONES	1

Índice

Posicionamiento


1. Bloquear movimiento horizontal del brazo	00:01 · pág. 3
2. Asegurar posición mediante freno	00:23 · pág. 4
3. Liberar freno para movimiento angular	00:41 · pág. 5



PASO 1 · POSICIONAMIENTO · 00:01

Bloquear movimiento horizontal del brazo


El operador acciona la palanca de bloqueo, marcada con el icono de candado, para inmovilizar el movimiento horizontal del brazo del arco en C.

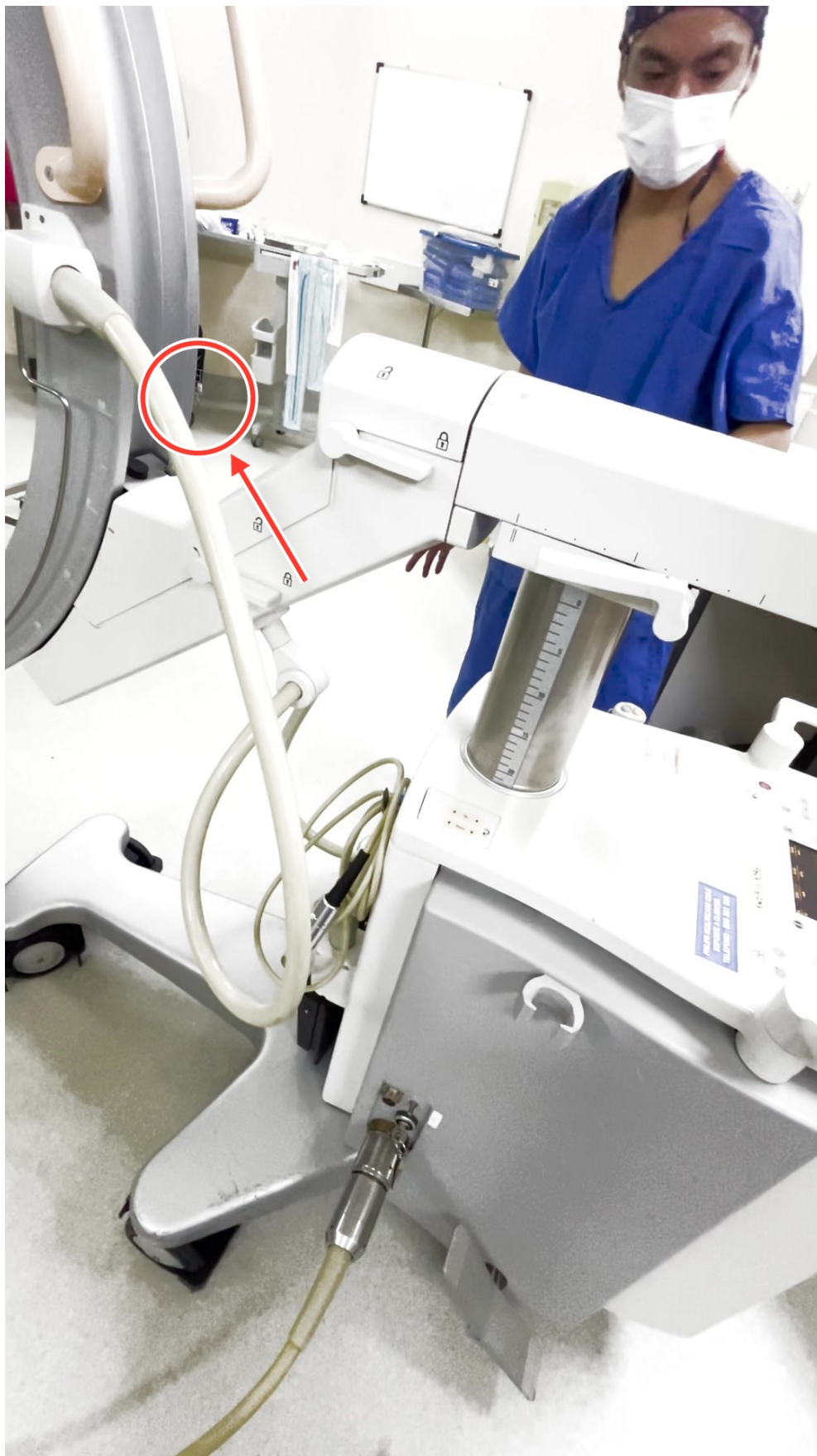

PASO 2 · POSICIONAMIENTO · 00:23

Asegurar posición mediante freno

Se muestra el mando de bloqueo situado en el brazo del arco, el cual permite asegurar la posición del equipo una vez realizado el ajuste.

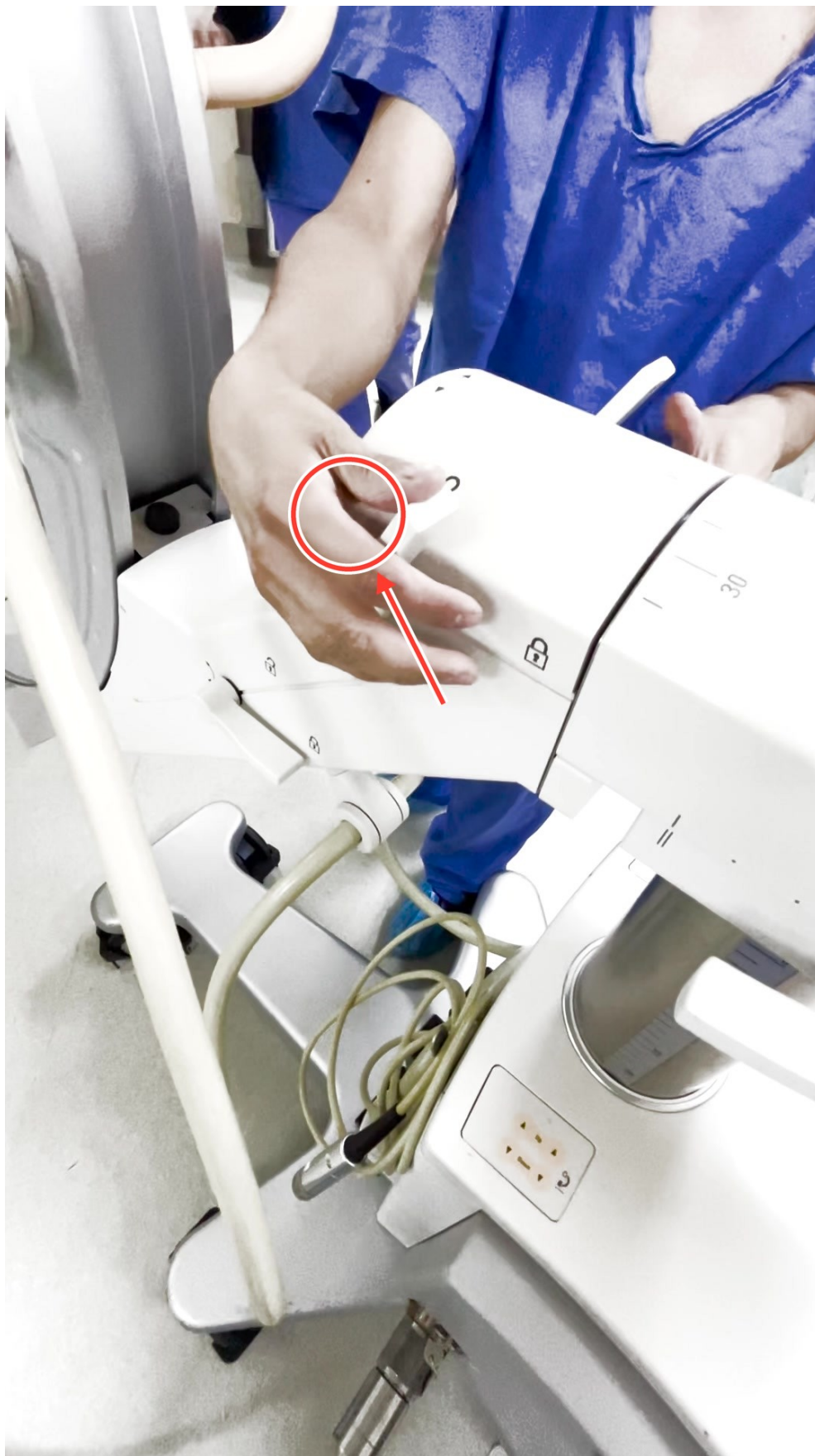

PASO 3 · POSICIONAMIENTO · 00:41

Liberar freno para movimiento angular

El operador sujeta la palanca de desbloqueo, permitiendo el movimiento angular del arco en C para ajustar la angulación necesaria.