

Procedimiento de liberación de camilla y seguridad en TC Canon

Este video instructivo muestra cómo operar manualmente la camilla de un tomógrafo computado Canon Aquilion Exceed LB en caso de falla eléctrica. Se detallan los mecanismos de liberación manual, los límites de movimiento del sistema y las consideraciones de seguridad al posicionar accesorios en la camilla plana CIVCO.

VIDEO	TC_03_Liberar_paciente_corte_de_luz_reinicio_gantry
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	02:54 (mm:ss)
PASOS	8
SECCIONES	3

Índice

Liberacion manual


1. Simular corte de energia	00:05 ·	pág. 3
2. Abrir compartimento de liberacion	00:22 ·	pág. 3
3. Girar manilla roja de liberacion	00:28 ·	pág. 4
4. Retirar paciente manualmente	00:32 ·	pág. 4
5. Bloquear camilla nuevamente	00:43 ·	pág. 5

Mantenimiento

6. Reiniciar disyuntor de gantry	01:01 ·	pág. 5
--	---------	--------

Seguridad y limites


7. Verificar limites de movimiento	02:22 ·	pág. 6
8. Posicionar cabezal adecuadamente	02:37 ·	pág. 6

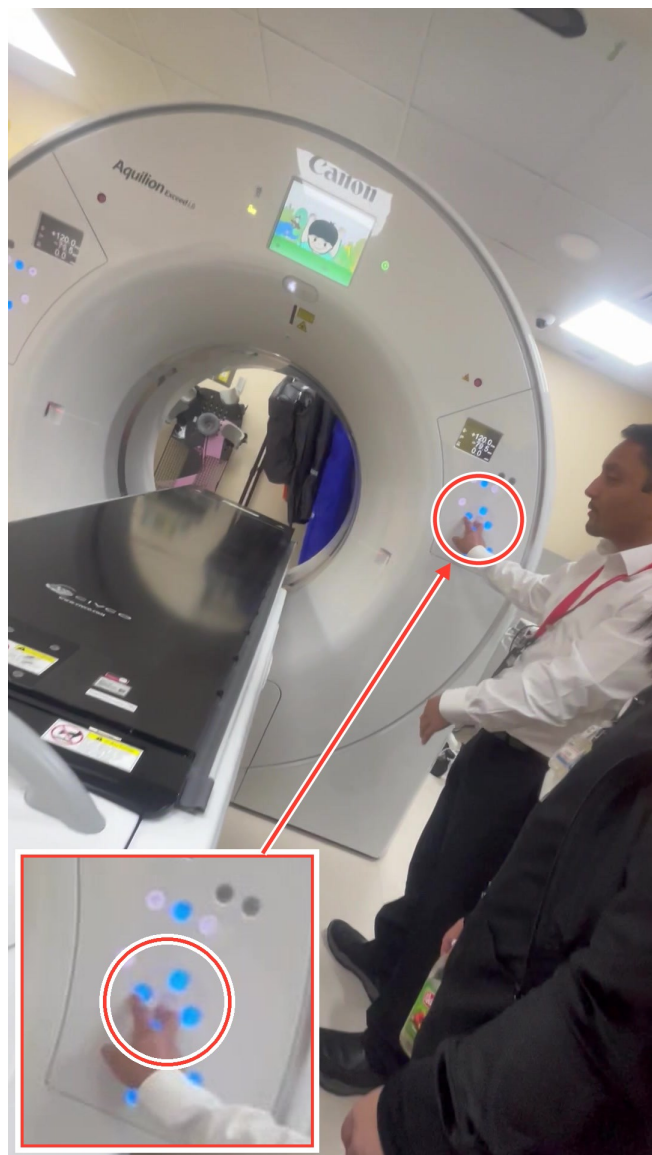

PASO 1 · LIBERACION MANUAL · 00:05

Simular corte de energia

El instructor simula una falla electrica total presionando los botones del panel lateral del gantry, dejando al equipo sin energia y con la pantalla apagada.

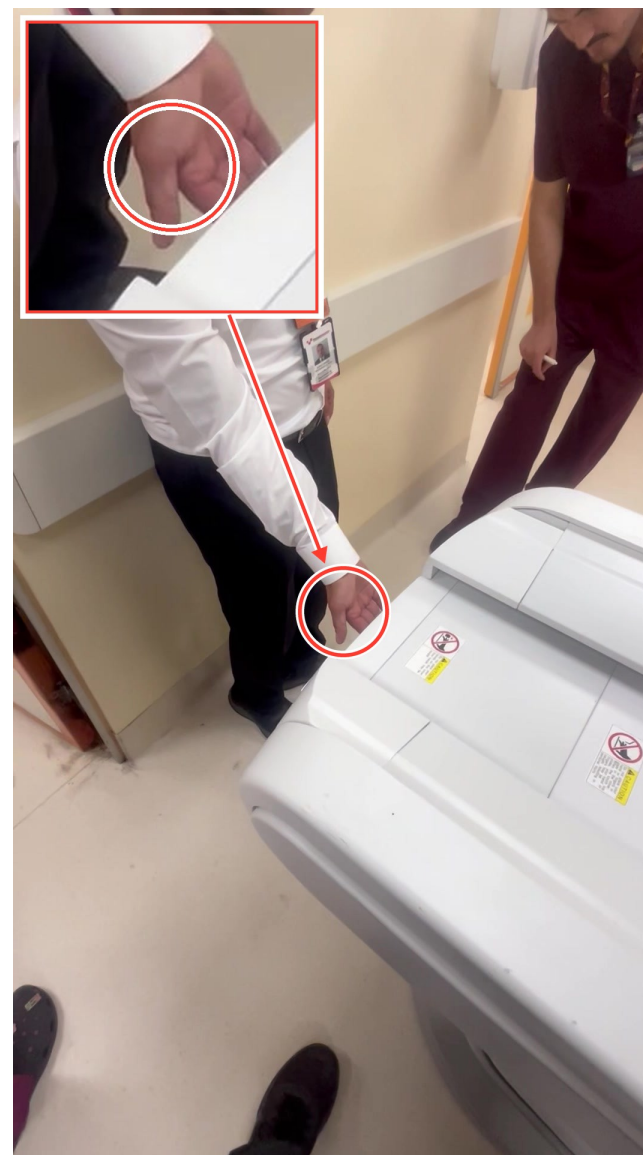

PASO 2 · LIBERACION MANUAL · 00:22

Abrir compartimento de liberacion


Presionar la tapa ubicada en el extremo final de la camilla para acceder al mecanismo de liberacion manual de emergencia.



PASO 3 · LIBERACION MANUAL · 00:28

Girar manilla roja de liberacion

Girar la palanca roja en la dirección de la flecha como indica la etiqueta COUCH-TOP MOVEMENT PROCEDURE DURING POWER FAILURE para permitir el movimiento manual.

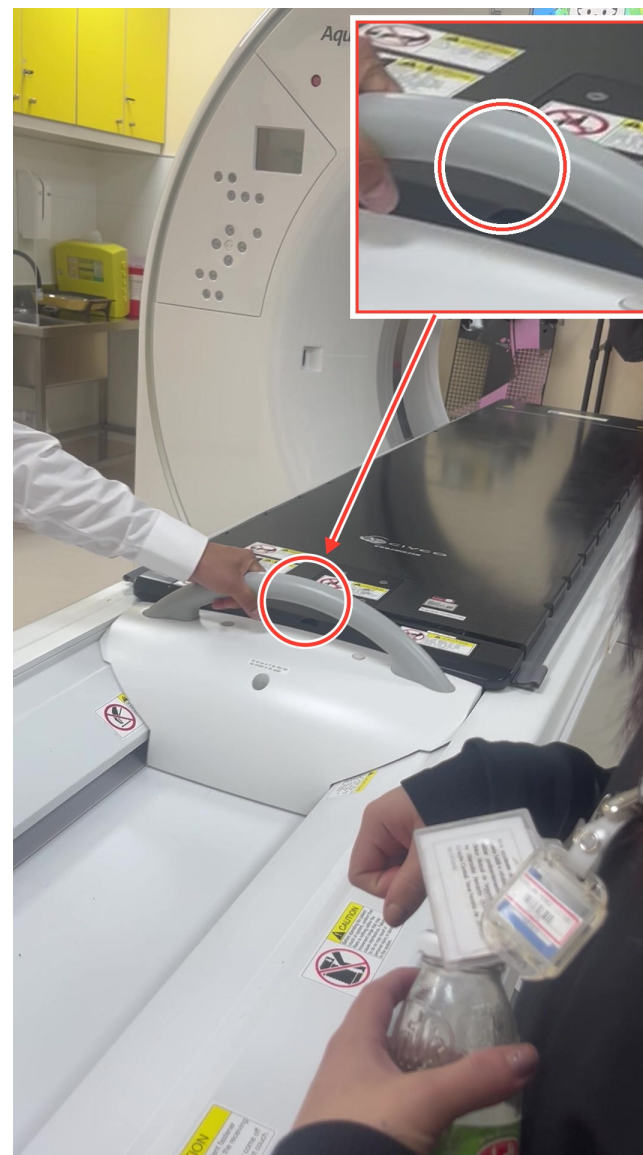

PASO 4 · LIBERACION MANUAL · 00:32

Retirar paciente manualmente


Con la manilla desbloqueada, el operador jala la camilla usando la manilla gris para extraer al paciente del tunel del gantry Aquilion Exceed LB.



PASO 5 · LIBERACION MANUAL · 00:43

Bloquear camilla nuevamente

Empujar la manilla roja hacia adentro a su posición original y cerrar la compuerta presionandola para asegurar el sistema.

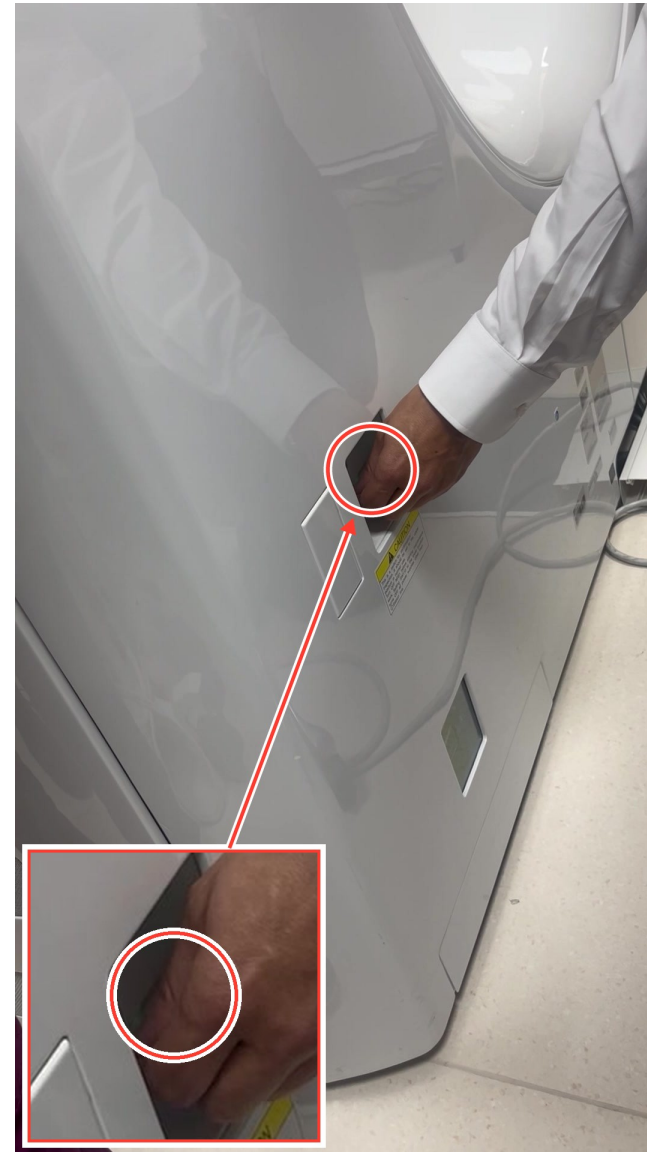

PASO 6 · MANTENIMIENTO · 01:01

Reiniciar disyuntor de gantry


Ubicación del interruptor en la parte lateral trasera del gantry para reiniciar el tomografo tras un fallo o a petición del servicio tecnico.



PASO 7 · SEGURIDAD Y LIMITES · 02:22

Verificar límites de movimiento

Identificar los límites de movimiento indicados en la estructura como STROKE END en color amarillo con borde negro.

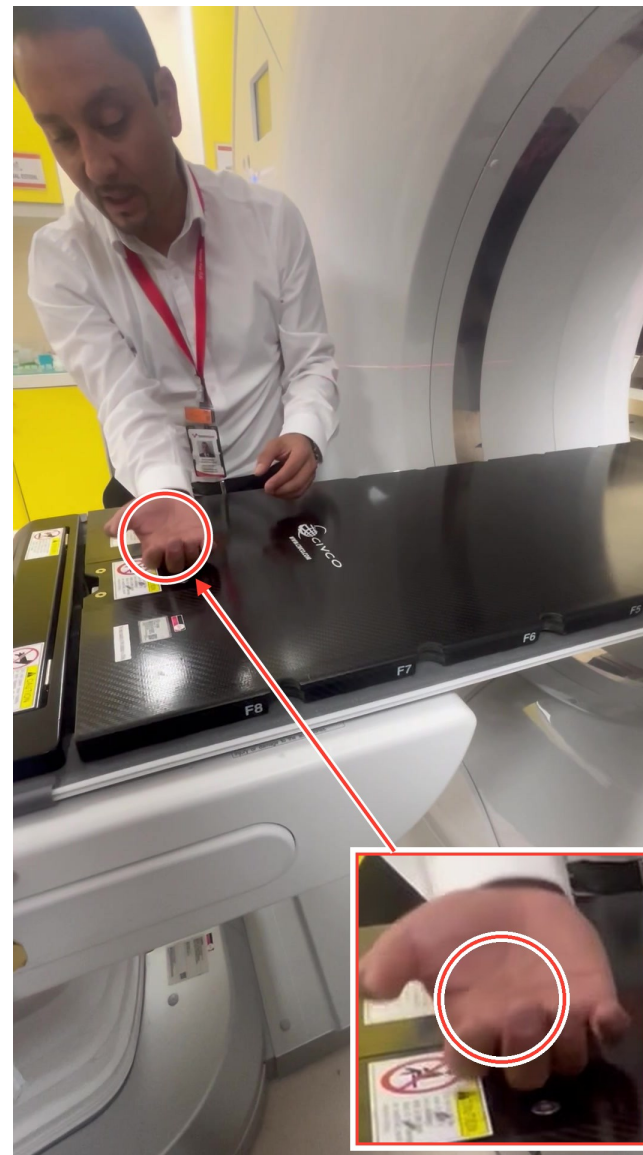

PASO 8 · SEGURIDAD Y LIMITES · 02:37

Posicionar cabezal adecuadamente

Advertencia sobre la estructura interna de la camilla plana CIVCO con divisiones F8, F7, F6, F5: evitar colocar la cabeza directamente en la zona de union para prevenir artefactos.

Transcripción del audio

00:00 Y por si falla la camilla o tiene energía la la camilla, ¿cómo se si llega a fallar? ¿Puedo simular un corte?

00:07 No tengo energía, no tengo nada. ¿Cómo saco al paciente del túnel? ¿Hm? Al fondo de la camilla...

00:18 Acá se presiona.

00:23 Acá. Va a estar así. Se presiona y hay una manilla roja.

00:30 Yo halo la manilla roja atrás y libera mecánicamente.

00:35 Claro, no voy a poder bajar la la camilla, pero al menos saqué al paciente del túnel, y aquí yo ya lo puedo ayudar a a salir.

00:41 Después la la manilla hacia adentro, vuelve a su posición original y se presiona.

00:48 Y ahí ya queda listo.

00:54 Este es el de servicio técnico, les puede pedir reiniciar el gantry.

00:59 Servicio técnico le va a pedir con este interruptor que está acá. Se baja y con eso se corta la energía.

01:05 Un minuto, levantar y vuelve la energía y se conecta inmediatamente con las consolas.

01:13 Es un interruptor para apagar el gantry. Como un automático.

01:17 Eso sí que lo pueden resguardar, pero si se llega a apagar todo, igual puedes sacar al paciente.

01:23 Y sacarla de adentro del túnel.

01:28 Si esto lo aplican con energía eléctrica, no va a funcionar. Tienes que usar los botones. Es solamente si se corta la energía eléctrica.

01:35 ¿Cuál colchón? Ah, el de... buena pregunta, ¿no están acá?

01:41 Pero si es fundamental. Fundamental el colchón.

01:48 ¿Será ese? No, está como muy delgada esa parte.

01:53 Están delgados.

01:59 ¿Qué es eso?

02:02 Tan grande el cabezal, es un cabezal.

02:07 Debe estar ahí adentro.

02:10 Ah, de verdad. Si ya veis que está ahí, entonces hace un movimiento que el equipo va a decir: "no puedo ejecutarlo porque estoy en el límite".

02:15 Y después más abajo ya me indica que el el end of stroke, o sea, ya no se mueve más. El stroke de movimiento pero el límite de escaneo está ahí.

02:22 Entonces, yo le diría que ojalá antes que se vea.

02:28 De todas maneras, esto igual tiene encima lo que es la camilla plana Civco. Las camillas aquí también tienen una estructura, entonces si ponen la cabeza aquí se van a ver los pernos.

02:35 O sea, debería estar de aquí en adelante.

02:38 ¿Entienden? Sí, porque esto... si no tuviera la camilla plana,...

02:44 ...claro, yo diría que de aquí en adelante, pero como tiene esto, esto es de aquí hacia allá.