

Guía de Operación de Arco en C Philips

Este video instructivo muestra la operación básica y el posicionamiento de un sistema de arco en C Philips en un entorno quirúrgico real. Se explican los diferentes movimientos mecánicos del equipo, la preparación estéril y las consideraciones de espacio en el quirófano.

VIDEO	Capacitacion_arco_en_C
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	04:19 (mm:ss)
PASOS	13
SECCIONES	5

Índice

Posicionamiento

1. Liberar el movimiento horizontal del brazo	00:02 ·	pág. 3
2. Bloquear la rotación del arco en C	00:25 ·	pág. 3
3. Ajustar la angulación para el procedimiento	00:41 ·	pág. 4
4. Realizar la rotación orbital del brazo	00:55 ·	pág. 4

Seguridad

5. Verificar la disponibilidad de delantales plomados	01:25 ·	pág. 5
---	---------	--------

Posicionamiento

6. Coordinar el movimiento de la mesa	01:39 ·	pág. 5
---	---------	--------

Preparación

7. Colocar la cubierta estéril en el arco	01:57 ·	pág. 6
8. Ajustar el arco con la funda colocada	02:11 ·	pág. 6

Posicionamiento

9. Comprobar la habilitación del espacio físico	02:32 ·	pág. 7
---	---------	--------

Adquisición de imagen

10. Revisar los parámetros en la pantalla	02:48 ·	pág. 7
11. Monitorear la inserción del catéter	03:08 ·	pág. 8

Apagado y limpieza

12. Apagar el sistema al finalizar	03:44 ·	pág. 8
13. Desconectar los cables de alimentación	04:03 ·	pág. 9



PASO 1 · POSICIONAMIENTO · 00:02

Liberar el movimiento horizontal del brazo

El operador muestra cómo destrabar la palanca de bloqueo para permitir el desplazamiento horizontal del arco en C hacia adelante y hacia atrás.



PASO 2 · POSICIONAMIENTO · 00:25

Bloquear la rotación del arco en C

Se muestra en detalle la palanca de bloqueo con el icono indicador para fijar la rotación del arco en una posición determinada.



PASO 3 · POSICIONAMIENTO · 00:41

Ajustar la angulación para el procedimiento

El operador explica que, aunque generalmente no se necesita ángulo para la zona renal, se puede inclinar el arco si es requerido.



PASO 4 · POSICIONAMIENTO · 00:55

Realizar la rotación orbital del brazo

Se destraba el freno correspondiente para rotar orbitalmente el arco, permitiendo obtener proyecciones oblicuas o laterales.



PASO 5 · SEGURIDAD · 01:25

Verificar la disponibilidad de delantales plomados

Se constata la presencia de los delantales de protección radiológica en el perchero antes de dar inicio a la emisión de radiación.



PASO 6 · POSICIONAMIENTO · 01:39

Coordinar el movimiento de la mesa

Se utiliza el control remoto de la mesa quirúrgica para ajustar la altura y posición del paciente en relación con el arco.



PASO 7 · PREPARACIÓN · 01:57

Colocar la cubierta estéril en el arco

Se coloca una funda plástica estéril sobre el receptor de imagen para mantener la asepsia del campo quirúrgico.



PASO 8 · PREPARACIÓN · 02:11

Ajustar el arco con la funda colocada

Se realizan movimientos de prueba con el arco cubierto para asegurar que la funda no limite el rango de movimiento necesario.



PASO 9 · POSICIONAMIENTO · 02:32

Comprobar la habilitación del espacio físico

El operador indica la importancia de mantener despejada la zona de tránsito del arco para evitar colisiones con otros equipos; en el panel se muestra el adhesivo END9 cl-1096.



PASO 10 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 02:48

Revisar los parámetros en la pantalla


Se observan en la pantalla de control los parámetros de examen seleccionados; se visualizan valores como 41 kV, 0.060 L 1.44 mA, modo Abdominal, 1/2 dosis, 17 cm, 3 s de velocidad de Fluoro y el identificador END9 cl-1096.



PASO 11 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 03:08

Monitorear la inserción del catéter

El equipo médico visualiza en el monitor en tiempo real el avance y la posición de la punta del catéter doble J.

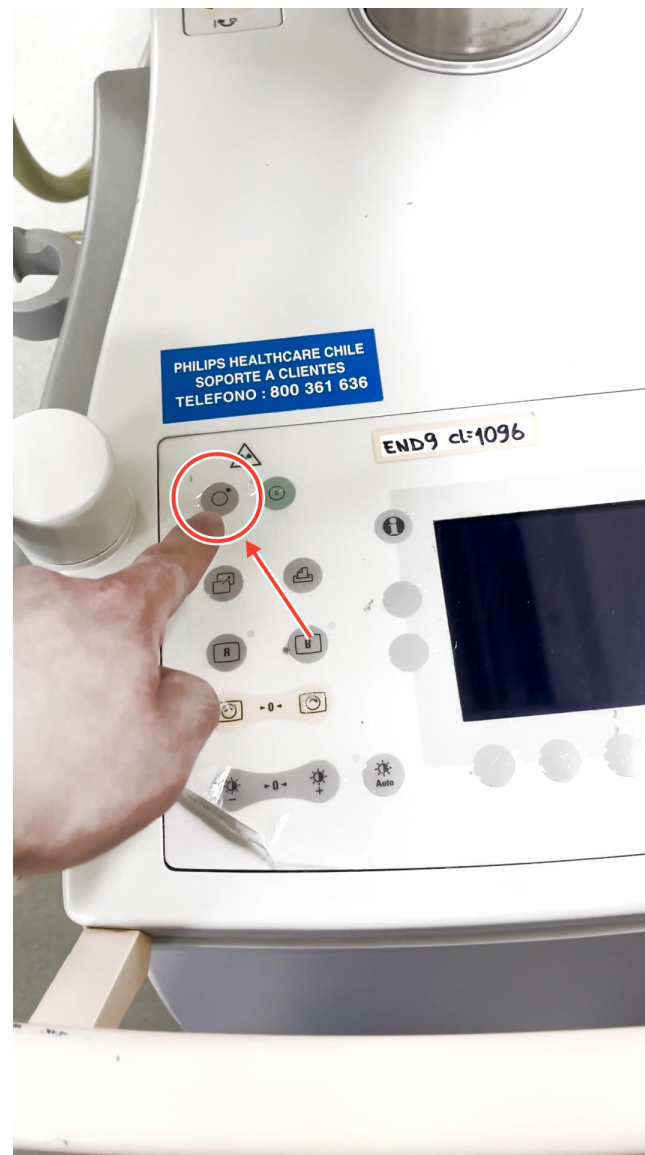

PASO 12 · APAGADO Y LIMPIEZA · 03:44

Apagar el sistema al finalizar

Se presiona el botón con el icono de un círculo de apagado ubicado en la esquina superior izquierda del teclado del panel de control del arco en C, al lado del botón verde.



PASO 13 · APAGADO Y LIMPIEZA · 04:03

Desconectar los cables de alimentación

Se procede a desenchufar y enrollar cuidadosamente los cables de red y de conexión entre el arco y el carro de monitores.